



Propaq LT | Monitor for kontinuerlig monitoring.

Welch Allyn Propaq® LT

Den endrer ikke bare hvordan du overvåker pasientene. Men også hvor.



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Propaq® LT

Overvåk flere pasienter på flere steder enn noen gang før.



Høy pålitelighet, lang levetid og lave kostnader er blant faktorene som ligger til grunn for den mest allsidige monitoren i dagens marked..

PropaqLT er den perfekte monitor for dagens avanserte sykehus miljø – den lar deg flytte kontinuerlig Monitorering til områder hvor det tidligere var teknisk vanskelig eller for kostnadskrevenende. Fordi den er så enkel å bruke og konfigurere, er Propaq LT det perfekte valg for sykepleiere innen allmennmedisin. Og med sin legendariske Propaq kvalitet, vet du at den er solid nok og pålitelig nok til at den kan benyttes i alle akuttavdelinger og for intern transport mellom avdelinger.

Med trådløs tilkobling og mulighet for enkeltmålinger fungerer Propaq LT som tre monitører i ett: pasientmonitor, transportmonitor og monitor for oppegående pasienter – men du betaler bare for én.



En monitor du kan bruke når – og hvor – du trenger den mest.




Utstyrt med Propaq LT storskjerm i farger og ladestasjon, er Propaq LT ideell til prosedyrebruk eller vanlig sengeovervåking. Og med et revolusjonerende design som er lett nok til å festes på et infusjonsstativ, solid nok for lufttransport og avansert nok for pediatrik bruk, gir Propaq LT deg mulighet til å overvåke flere pasienter på flere plasser enn tidligere.

VIST I FAKTISK STØRRELSE:
Welch Allyn Propaq LT veier
mindre enn et kilo.



Avansert Masimo teknologi inkluderer Signal Identifikasjon og kvalitetsindikator (SIQ) og Perfusjonsindeks (PI), vist nedenfor i tabularisk trend med kurver i skjermen.

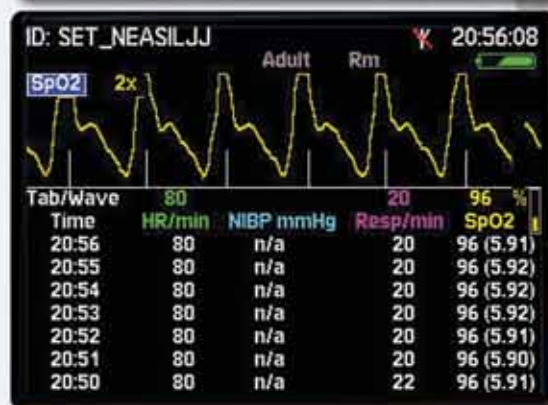

Bytt raskt mellom tre visningsmodi som passer til ditt pleieområde (velg mellom fem alternativer). Vist på monitoren er store numeriske verdier, og over dette 2 kurver og tabularisk trend med kurver.

Viktigste funksjoner:

- Enestående kvalitet og holdbarhet med støtmotstand opp til 75 g, nok til å tåle et fall på 6 fot.
- Hjerterefrekvens, 3- eller 5-ledet EKG, SpO₂, NIBP og respirasjon
- Masimo SET® bevegelse-tolerant SpO₂ eller Nellcor® SpO₂
- Smartcuf® bevegelse-tolerant NIBP
- Modus for neonatal, barn og voksen
- Kontinuerlig monitorering og spot-sjekk modus
- 24-timers trender i tabell- eller grafisk form
- Lagrer opp til 20 kurveutsnitt
- Mulighet for trådløs tilkobling til Welch Allyn Acuity® Central Station via FlexNet™ 802.11a
- Sertifisert for bruk store og små fly og helikopter av US Military



Konstruert for å oppfylle kravene i dagens sykehusmiljø.

Stor fargeskjerm (tilleggsutstyr)

Propaq LT kan uten problemer kobles til en stor fargeskjerm. Du kan da velge mellom visning av 4 eller 9 kurvemodi, noe som gjør den perfekt til sengeliggende pasienter eller til prosedyreovervåkning. Og med de mange mulighetene for montering på bordplate og vegg er den så fleksibel at du kan bruke den store fargeskjermen der du trenger den mest. Standardskjermer kan kjøpes separat til bruk med dette alternativet.



Velg mellom visningsmodi med 4 eller 9 kurver og se store, tydelige måleverdier, kurver og alarmgrenser.



Skriv ut en A4 tabularisk trend rapport som viser pasientdata, uthev alarm hendelser og legg ved pasientjournal, eller skriv ut kurvebilde.



Stor fargeskjerm montert på vegg.



Basert på nyeste teknologi

Propaq LT kommuniserer med enhver Windows 2000/XP PC via USB port og gir brukeren mulighet til egenkonfigurasjon av monitoren, samt å skrive ut eller eksportere pasientdata. Propaq LT kobles til nettverk via FlexNet 802.11a to the Acuity® Central Station for å bli en del av en fleksibel monitoreringsløsning. Brukeren kan velge å bruke sin trådløse Propaq LT monitor på et dedikert 802.11a nettverk eller delt 802.11a/b/g nettverk sammen med annen sykehusapplikasjon.



Liten nok til å få plass på nattbord, lett nok til å bære rundt, kan du enkelt sette den kompakte Propaq LT i ladestasjonen plassert ved sengesiden.

Kontakt din lokale Welch Allyn-representant hvis du ønsker mer informasjon om Propaq LT.



Alle Propaq-pasientmonitører leveres med Smartcur-teknologi, en ny standard for nøyaktige NIBP-målinger. Denne patenterte programvaren har markedets beste yteevne og nøyaktighet ved bevegelsesarterfakter.



Denne monitoren er godkjent for bruk under alle faser av flygning ombord i et av U.S. Army fly.
MIL STD 461E
Militer: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103.



Kun Masimo SET SpO₂ sensorer, inkludert LNCS serien av kabler og NR merket engangssensorer, skal brukes med Masimo pulse oksimetri. Masimo, Masimo SET, LNCS og NR er registrerte varemerker av Masimo Corporation.



Bruk kun Nellcor® pulsoksymetri-prober, deriblant OxiMax® klebeproker, sammen med Nellcor pulsoksymetriutstyr. Nellcor er et registrert varemerke for Nellcor Puritan Bennett Inc.



Welch Allyn Acuity® Central Monitoring Station bruker Aruba Mobile Edge Architecture med beste HIPAA sikkerhet, en overlegen stemme og data nettverk løsning med høy tilgjengelighet for kritiske applikasjoner.

Welch Allyn European Customer Service,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
Telephone: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754
www.welchallyn.com

Med enerett. Acuity, Propaq og Smartcur er registrerte varemerker for Welch Allyn. FlexNet er et varemerke for Welch Allyn. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i dette dokumentet er kun for identifikasjon og kan være varemerker eller registrerte varemerker for de tilhørende produsentene.

© 2009 Welch Allyn SM2B32NO Rev F

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™